



**Digital Sex Power Box with 4 channels.**

**Manuel in Dutch**

## 4 Kanaals Digitale Electro Sex Power box.



### Gebruiksaanwijzing:

#### **Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u dit artikel in gebruik neemt.**

Deze Rimba elektro sex stimulator werkt zowel op netvoeding (AC 110-220 volt) als op batterijen (DC 3 x AAA). Dit apparaat zendt elektrische stroomstootjes uit om zenuwen in de erogene zones te prikkelen. Deze stimulatie heeft zowel een erotisch, seksuele als een medische werking. Zo kunnen lichamelijke problemen als erectiestoornissen, incontinentie en bekkeninstabiliteit behandeld worden door middel van electro stimulatie therapie. Raadpleeg altijd eerst uw arts indien u met dergelijke problemen kampt.

Het principe van electro sex stimulatie is het creëren van een oncontroleerbare spiercontractie door middel van een elektrische schok. De stroomschok prikkelt een zenuw en die zorgt voor een samentrekking van één of meerdere spieren gelegen in de directe nabijheid van de zenuw. Hoe sterker de prikkel, des te groter de kracht van de samentrekking van de spier zal zijn. Rimba heeft een groot aantal accessoires ontworpen en ontwikkeld welke op de alle verschillende Rimba power boxen zijn aan te sluiten. De accessoires of elektrodes hebben verschillende vormen en afmetingen, afgestemd op de erogene zones voor zowel de man als de vrouw.

Deze electro sex power box # 7890 heeft 4 kanalen, welke elk afzonderlijk van elkaar in sterkte instelbaar en regelbaar zijn door de + en de – drukknop te gebruiken. Elk kanaal is bi-polair, u kunt dus 4 verschillende bipolaire accessoires gelijktijdig gebruiken. (in verschillende sterkte)

Er zijn 5 verschillende stimulatie programma's. De keuze die u maakt geldt voor alle 4 de kanalen. Het is dus niet mogelijk om per kanaal een programma keuze te maken. Uw keuze zal door middel van een grafiek in uw display zijn af te lezen.

### Deze set bevat:

- 1 x 4-kanaals power box met LCD scherm.
- 4 x gel pads (elektrodes)
- 2 x gel pads voor drukknop aansluiting
- 5 x stroomdraden
- 3 x 1.5 volt AAA batterijen
- 1 stroom adapter
- 1 Internationale reis adapter
- Engelstalige gebruiksaanwijzing



## WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Elektro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig om met de apparatuur en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door.

- **Niet gebruiken** als u een pacemaker, hartproblemen of hartritmestoornissen heeft.
- **Niet gebruiken** als u zwanger bent.
- **Niet** op oogleden gebruiken.
- **Niet** op beschadigde huid gebruiken.
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht onder de huid liggen
- Vermijdt abrupte verandering in de schok in/afstelling
- Buiten bereik houden van kinderen
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht en zet de powerbox uit voordat u de accessoires van het lichaam verwijdert.
- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk.
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox **nooit** in contact komen met water!
- Indien het stroomsnoer beschadigd is, NIET gebruiken

### Neven effecten:


Huidirritatie kan in het begin optreden als men de powerbox gebruikt (bijv. Rood worden van de huid). Dit is normaal. Als huidirritatie aanhoudt, dan **onmiddellijk** het gebruik van de powerbox staken.

### Vorbereiding:

1. Controleer of alle te gebruiken onderdelen compleet en onbeschadigd zijn.

- Plaats of 3 AAA penlite batterijen in het batterijen reservoir aan de onderkant van de power box of gebruik het bijgeleverde stroomsnoer met adapter om de power box van stroom te voorzien.
- Controleer of de power box werkt door de power knop ON/OFF in te drukken. De blauwe LED lamp zal gaan branden en het display zal gaan functioneren. De timer staat automatisch ingesteld op 5 minuten en start direct het aftellen.
- Druk de “ - ” toetsen in, om elk kanaal op het nul niveau in te stellen
- Sluit de te gebruiken elektroden aan op de bovenkant van de power box op het gewenste kanaal (1,2,3 of 4)

De digital sex power box is nu klaar voor gebruik.

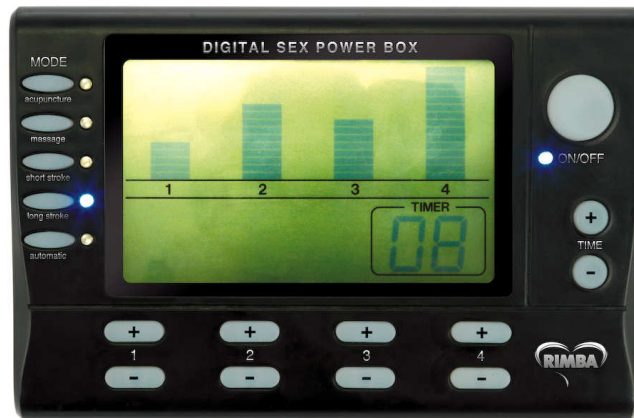

## Aan de slag:

- Plaats de elektrodes op of in het te behandelen, onbeschadigde en niet geïrriteerde lichaamsdeel. Gebruik op droge oppervlakten ruim voldoende contact gel.
- Maak uw keuze onder “MODE” uit de verschillende programma’s
- Stel de automatische timer in, regelbaar per 5 minuten met een maximale tijd van 30 minuten.
- Schakel nu voorzichtig de stroom in door de “+” toets in te drukken. De stroomsterkte wordt aangegeven in het diagram. Er zijn 15 verschillende niveaus per kanaal
- Het is mogelijk om tijdens de sessie het programma (de MODE) te wijzigen.
- Om in noodgevallen de sessie abrupt af te breken gebruikt u de ON/OFF knop
- Nadat u de power box heeft uitgeschakeld kunnen de elektrodes (bijv. gel-pads) van het lichaam worden verwijderd en daarna losgekoppeld van de power box.

## TIPS:

- Reinig het gedeelte van het lichaam, wat u wilt behandelen met een vochtig, warm doekje en breng daarna de elektrodes aan op het te behandelen gedeelte van het lichaam.
- Noodstop: Druk de ON/OFF toets om de behandeling abrupt af te breken.
- Verwijder de batterijen uit de power box als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt.

**Herhaal bovenstaande aanwijzingen bij het eerstvolgende gebruik van uw power box.**

## De bedieningstoetsen:

De power box is uitgerust met de volgende drukknoppen:

- ON / OFF toets: voor het aan- en uitzetten van de power box.
- Time + en - toets : de gewenste tijdsduur kan per 5 minuten ingesteld worden. De maximale tijdsduur, die ingesteld kan worden, is 30 minuten. Na 30 minuten zal de power box zichzelf uitschakelen.
- ‘Mode’ toetsen: De ingeschakelde mode wordt aangegeven met een blauw LED lampje.

4. Intensiteit toetsen + en -. Elk kanaal kan afzonderlijk in sterkte geregeld worden en heeft zijn eigen plus en min knoppen. Er zijn 15 intensiteitsniveaus, per kanaal.

## LCD scherm:

Het LCD scherm geeft aan welke kanalen aanstaan en in welke sterkte. Elk streepje is een niveau. De grafiek laat zien welk programma ingeschakeld is en de timer geeft aan hoeveel minuten het programma nog duurt.

## Veiligheid:

De power box is geen speelgoed. Indien u onder behandeling bent bij een arts of specialist, raadpleeg deze dan voor een risico inventarisatie, alvorens u de power box gaat gebruiken. Voorbeelden van risico's kunnen zijn o.a. tumoren, ontstekingen, hartafwijkingen, huidziektes.

Gebruik de digital sex power box **nooit** in combinatie met de volgende medische apparatuur en/of hulpstukken:

1. Pacemaker of andere cardio apparatuur.
2. Protheses of andere metalen pinnen, platen of schroeven in uw lichaam.
3. Alle elektronische, medische apparatuur ten behoeve van uw gezondheid.

Accessoires van de powerbox niet aanbrengen op de ogen, in de buurt van het hart, in de mond en op verwondingen aan de huid.

Deze powerbox niet gebruiken als u zwanger bent, of denkt te zijn.

## Reiniging en onderhoud:

Reinig de buitenkant van de powerbox met een licht vochtige doek. Gebruik geen chemische middelen of alcohol. Laat geen vocht in de powerbox komen.

Reinig de elektrodes (gel-pads) met een vochtige doek en leg ze weg om te laten drogen (niet blootstellen aan direct zonlicht).

Bewaar de powerbox niet in vochtige ruimtes en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen of water. Haal de powerbox niet uit elkaar om te bestuderen of te repareren.

Gebruik nooit een andere stroomkabel dan de kabel die is bijgeleverd.

Verwijder de batterijen uit de powerbox als deze voor een langere periode niet gebruikt wordt.

## Product specificaties:

Vermogen	4.5V, 3 x AAA
Frequentie	1 — 100HZ
Stroomverbruik	Max. 540mw max.
Output Power	Min. 25uA, 1.25mW Max. 100uA , 20 mW (in 2K Ohm elektrisch vermogen)
Pulse sterkte	20—220 $\mu$ S

## Problemen en oplossingen:

Status van het product	Problemen	Oplossingen
Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het inbrengen van de batterijen.	Batterijen zijn leeg.	Vervang alle 3 de batterijen.
	Batterijen zijn al gebruikt of niet correct.	Controleer het probleem en vervang of herplaats de batterijen.
	Het contact tussen de batterijen en de powerbox is slecht.	Plaats de batterijen opnieuw, en let op – en + polen.
Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het aansluiten op de netspanning.	Er is geen aanvoer van stroom.	Controleer of het stroomsnoer goed is aangesloten. Zowel in het stopcontact als in de powerbox.
	U gebruikt een ander soort stroomsnoer.	Gebruikt het originele meegeleverde snoer.
Het LCD-scherm werkt, maar het apparaat werkt niet.	Is plug van de stroomdraad goed aangesloten in het apparaat?	Controleer en corrigeer de verbinding tussen de stroomdraad en apparaat, en stroomdraad en accessoire.
	Zijn de stroomdraden en de elektrodes op de juiste wijze verbonden?	Verbind deze op de juiste wijze.
Stroomstootjes worden zwak of tintelend.	Is de elektrode op juiste wijze op de huid geplaatst?	Druk de elektrode (gel-pad) stevig op de huid. Gebruik contact gel voor beter contact.
	Is de oppervlakte van de elektrode vies?	Maak de elektrode schoon met een doekje.
	Is het huidoppervlak vies?	Maak de huid schoon.
De stroomstootjes stoppen voordat de 30 minuten voorbij zijn.	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen of gebruik het stroomsnoer.

De huid wordt rood, jeukerig of gaat tintelen.	Huidallergie voor het materiaal van de elektrode.	Kies een andere positie op de huid of verkort de gebruikstijd om heftigere reacties te voorkomen. Stop het gebruik als allergische reactie aanhoudt.
--	---	--

**Designed and distributed by:**

Rimba B.V.  
Pottenbakkerstraat 14  
4871 EP Etten-Leur  
Netherlands

Tel. +31 (0) 5414484  
Fax. +31 (0) 5420703  
E-mail: [info@rimba.nl](mailto:info@rimba.nl)  
Website: [www.rimba.nl](http://www.rimba.nl)

MADE in CHINA